

MESA MAYO

Elevación de Precisión y Estabilidad Absoluta en el Campo Estéril



CUMPLE CON NORMA



El punto focal de la instrumentación quirúrgica. Nuestra Mesa Mayo Serie 304 está diseñada para brindar un acceso inmediato y seguro al instrumental crítico justo sobre la zona de intervención. Mediante una ingeniería de soporte avanzada, logramos un equipo de ajuste milimétrico que elimina las oscilaciones e interrupciones, permitiendo que el cirujano y el instrumentista operen con fluidez y total confianza.

La Diferencia Estructural El mayor defecto de las mesas Mayo comerciales es el "tambaleo" del mástil cuando se somete al peso de las cajas de instrumental. Hemos resuelto este problema aplicando los principios de distribución de carga de nuestra división de infraestructura pesada. Diseñamos una base en forma de "U" o "T" invertida con un centro de gravedad optimizado y anclajes de soldadura TIG de penetración completa. El resultado es un mástil de acero rígido que no vibra ni cede, incluso en las cirugías más exigentes.



MESA MAYO


CARACTERISTICAS

- **Acero Quirúrgico de Alta Resistencia:** Estructura tubular y charola fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Resistente a la oxidación, impacto y a los agentes químicos de esterilización hospitalaria.
- **Mecanismo de Elevación Preciso:** Sistema de ajuste de altura de deslizamiento suave, fijado mediante una perilla de sujeción ergonómica que garantiza un bloqueo mecánico firme, sin riesgo de caídas súbitas.
- **Charola Extraíble de Bioseguridad:** Bandeja superior desmontable con diseño embutido, procesada con pulido sanitario a espejo. Facilita una transición rápida, higiénica y segura hacia la central de esterilización (CEYE).
- **Base Antivuelco y Desplazamiento Silencioso:** Chasis inferior de peso balanceado equipado con rodajas de polímero clínico bidireccionales. Permite introducir la base debajo de la mesa quirúrgica con un movimiento ultrasilencioso, protegiendo los pisos epóxicos.

Aplicaciones Ideales El soporte indispensable para el instrumental de uso inmediato en:

- Quirófanos Generales y de Alta Especialidad (Neurocirugía, Cardiovascular)
- Salas de Expulsión y Cirugía Obstétrica
- Clínicas Odontológicas y Maxilofaciales Premium

Respaldo y Garantía Fabricada con la misma exigencia estructural de nuestra línea de infraestructura clínica mayor. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de manufactura y soldadura.

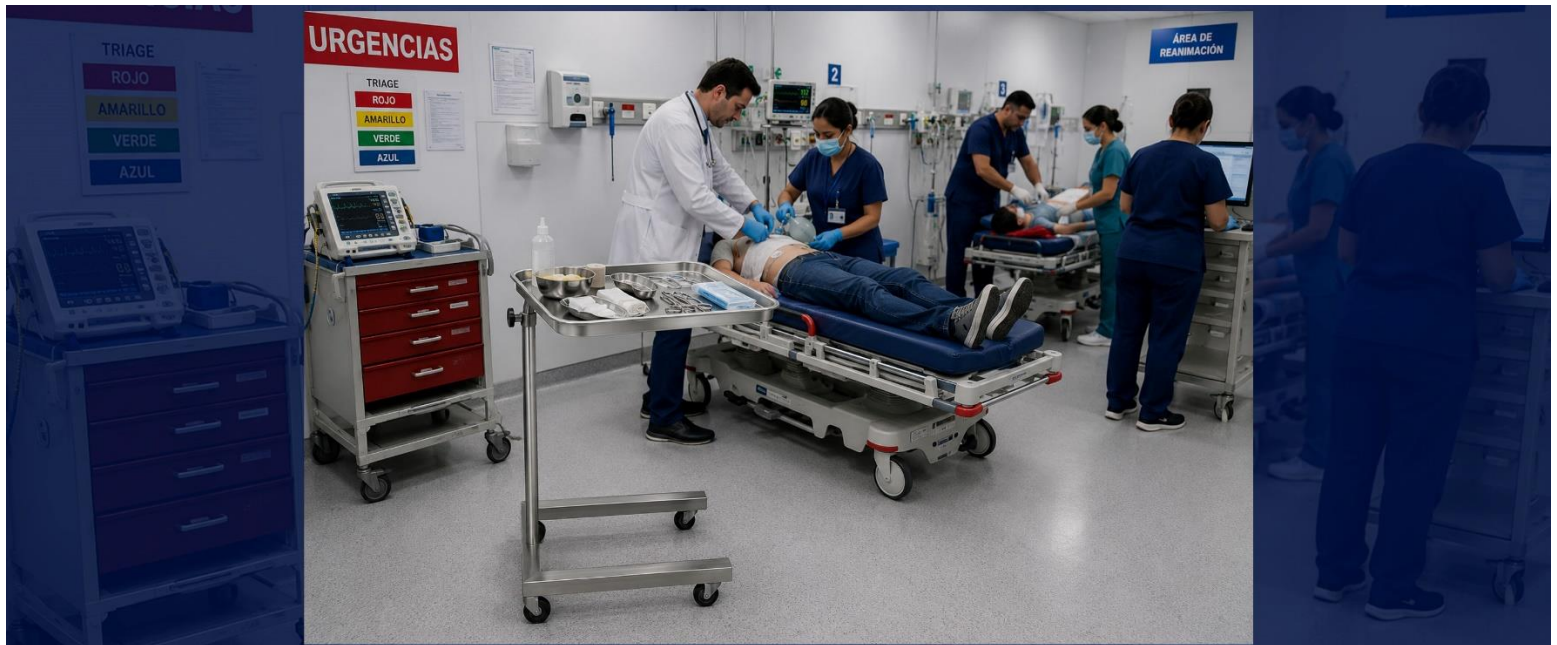

MESA MAYO



Material de construcción:		Acero inoxidable tipo AISI-304,
Descripción Técnica	1 Base	Base: Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, calibre No 15, de 5.1 x 5.1 cms (2"x2").
	2 Patas	Patatas fijas traseras, fabricada en acero inoxidable, AISI 304.
	3 Ruedas	Con 2 ruedas frontales de 75 mm (3") de diámetro con vástago y eje de rodamiento de acero de alta resistencia.
	4 Columna fija	Fabricada en tubo de acero inoxidable, AISI 304, CALIBRE No. 18 de 3.17 x 3.17 cms (1 ¼" x 1 ¼"), y tubo circular de 3.17 cms (1 ¼").
	5 Columna deslizable	Mediante columna telescópica con seguro de fijación a cualquier altura dentro del rango de 90 a 150 cms, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI 304 calibre No 15 compuesta por tubo cuadrado de 2.54 x 2.54 cm (1" x 1") y tubo circular de 2.54 cms (1") de diámetro.
	6 Soporte Charola	Soporte de charola Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 12 peralte de 2.54cms (1") con diseño para soportar la charola mayo.
Acabados		Acero inoxidable tipo AISI-304 Pulido Sanitario
Sistema de ensamble		A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 "I" de 3/8")
Tolerancias		En las dimensiones generales +/- 5%
Dimensiones externas:		ancho 35 cms, profundidad 60 cms, altura variable
Capacidad de carga:		50 kgs
Peso:		
Compatible con:		Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986
Ref:		513.621.2786

