

# PORTA VENOCLISIS

Estabilidad Antivuelco y Desplazamiento Clínico Ininterrumpido



CUMPLE CON NORMA



Diseñado para garantizar el suministro seguro y continuo de fluidos intravenosos y el soporte de bombas de infusión en áreas críticas. Nuestro Porta Venoclisís Serie 304 combina un mástil de acero de alta rigidez con un centro de gravedad meticulosamente calculado. Es el aliado perfecto para traslados intrahospitalarios rápidos, asegurando que el equipo médico y los fluidos del paciente se mantengan estables y seguros en todo momento.

**La Diferencia Estructural** La deficiencia más crítica de los portasueros comerciales es su inestabilidad: bases ligeras de plástico que se fracturan, o sistemas de fijación que se barren, provocando la caída súbita del mástil y de las soluciones. En SBM solucionamos esto mediante un chasis inferior pesado de cinco puntas (pentagonal) en acero inoxidable sólido, garantizando una geometría antivuelco perfecta. Su sistema de ajuste de altura cuenta con un mecanismo de bloqueo mecánico por fricción que soporta cargas pesadas sin ceder un solo milímetro.

# PORTA VENOCLISIS


## CARACTERISTICAS

- **Mástil de Acero Quirúrgico:** Tubo telescópico fabricado en acero inoxidable AISI 304 de alto calibre. Resiste impactos, rayaduras y la flexión mecánica causada por el peso de múltiples bombas de infusión.
- **Ganchos de Anclaje de Alta Capacidad:** Corona superior con 2 o 4 ganchos (tipo cuerno de carnero) soldados mediante tecnología TIG. Diseñados para soportar el peso máximo de las bolsas de solución sin riesgo de deformación o ruptura.
- **Base Pentagonal de Precisión:** Centro de gravedad optimizado en una estructura de cinco apoyos de acero pulido a espejo. Su diseño geométrico facilita la limpieza y elimina la acumulación de polvo o agentes patógenos.
- **Rodamiento de Baja Fricción:** Equipada con cinco rodajas multidireccionales de polímero clínico (con opción de freno). Aseguran un traslado suave, sin atascos en las juntas del piso y de manera ultrasilenciosa, protegiendo al paciente de vibraciones innecesarias.

### Aplicaciones Ideales Soporte vital e infusión de fluidos en áreas de alto movimiento:

- Terapia Intensiva (UCI) y Cuidados Intermedios
- Quirófanos y Salas de Recuperación
- Urgencias, Choque y Hospitalización General

**Respaldo y Garantía** Fabricado bajo la misma exigencia de nuestra línea de infraestructura médica pesada. Todos nuestros equipos cuentan con garantía total contra defectos de manufactura, soldadura y fatiga del sistema de elevación.

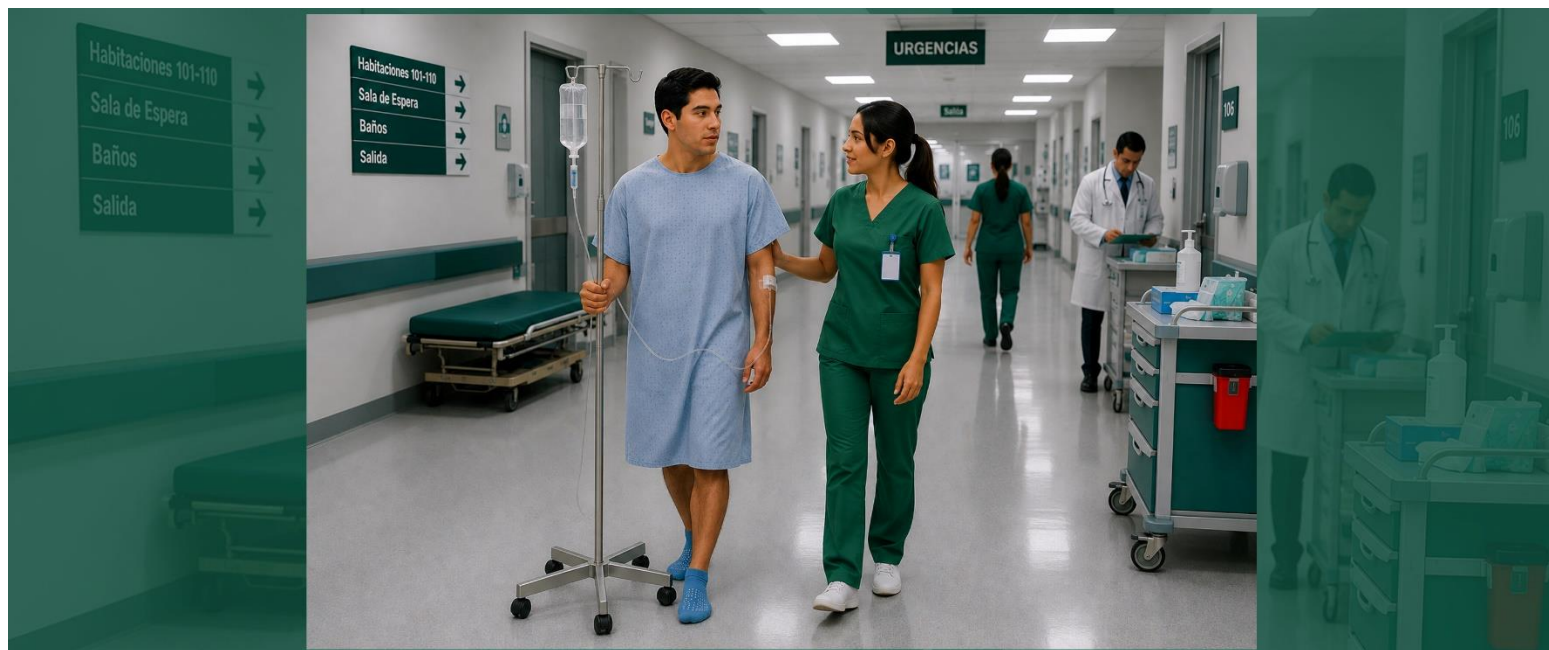

# PORTA VENOCLISIS

|                           |                         |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de construcción: |                         | Acero inoxidable tipo AISI-304,                                                                                                     |
| Descripción Técnica       | 1<br>Antena telescópica | Fabricada de barra redonda de acero inoxidable, AISI 304, de 12.7 mm de diámetro (1/2") , cruceta de 2 ganchos de 9.5 mm (3/8").    |
|                           | 2<br>Base               | <b>De cinco apoyos:</b> Fabricada en perfil tubular de lámina de acero inoxidable, calibre No. 16 de 25.4 x 0.7 mm (12 x 2").       |
|                           | 3<br>Tubo               | <b>Tubo:</b> Fabricado en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18 que permite ensamble telescópico de la antena portavenoclicis. |
|                           | 4<br>Perilla Opresora   | Para ajuste de alturas de la antena, fabricada en acero inoxidable AISI, con sistema tipo trinquete.                                |
|                           | Ruedas                  | Giratorias de doble huella tipo yoyo de nylon.                                                                                      |
| Dimensiones externas:     |                         | Cruceta de 50 cms, altura 125 a 210 cms                                                                                             |
| Capacidad de carga:       |                         | 50 kgs                                                                                                                              |
| Tolerancias               |                         | En las dimensiones generales +/- 5%                                                                                                 |
| Acabados                  |                         | Pulido Sanitario                                                                                                                    |
| Peso:                     |                         |                                                                                                                                     |
| Compatible con:           |                         | Normas Para Calidad de Mobiliario IMSS JCC-51 MAYO 1986                                                                             |
| Código de producto:       |                         | 00019PRTLRLLS                                                                                                                       |

